




ZUSAMMENFASSUNG

Verbleiter Tischschutz für Kopf- und Fußebene	2
Bleischutz für die untere Körperhälfte des Personals am Operationstisch, an der Kopfebene des Patienten K 313/A2	2
Verbleiter Tischschutz auf Fussebene K311/TC004	2
Bleischutz für die untere Körperhälfte des Personals am Operationstisch, an der Kopfebene des Patienten für Tisch Allura AD7 - K 313/A3	3



VERBLEITER TISCHSCHUTZ FÜR KOPF- UND FUSSEBENE

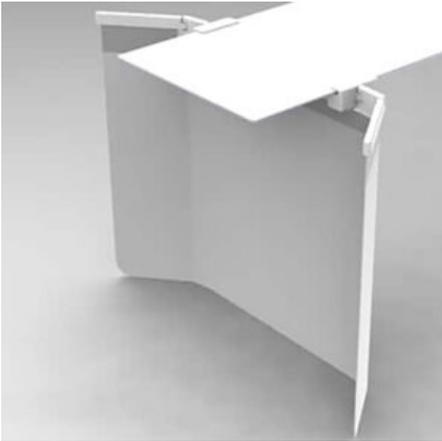

BLEISCHUTZ FÜR DIE UNTERE KÖRPERHÄLFTE DES PERSONALS AM OPERATIONSTISCH, AN DER KOPFEBENE DES PATIENTEN K 313/A2

Dieses Bleischild schützt die untere Körperhälfte des medizinischen Personals vor der Streustrahlung, ausgehend vom Tisch oder des Patientenkörpers.

Es lässt sich leicht am Ende des Tisches montieren und schützt das medizinische Personal, das sich in der Nähe des Tisches befindet. Er besteht aus einem 57 cm breiten Mittelteil und zwei 31 cm breiten, schwenkbaren Seitenarmen, an denen ein 80 cm langer, flexibler 0,5 mm Pb-Äquivalenzvorhang befestigt ist. Die Schwenkarme können entlang des Tisches oder um den Benutzer herum platziert werden.

[Mehr Infos](#)





VERBLEITER TISCHSCHUTZ AUF FUSSEBENE K311/TC004

Dieser Oberkörperschutz schützt das Personal vor Streustrahlung und bei einigen interventionellen Eingriffen auch vor möglichen Blutspritzern.

Entwickelt für den Einsatz auf dem Tisch über der Fußhöhe.

Dieser Schutz wird an den Zuberhörchiene von 25 mm hohen (7,7 mm bis 10 mm dick) am Tisch befestigt.

0,5 mmPb Acryl Bleiglas 60 cm hoch x 80 cm breit (je nach Tischbreite) mit unterem flexiblen Vorhang.

Kann auf beiden Zubehörschienen 25 mm hoch (Dicke 7,7 - 10 mm) montiert werden.

Blei-Acrylfenster 60 cm hoch x 80 cm breit (abhängig von der Tischbreite), mit unterem Vorhang.

[Mehr Infos](#)





BLEISCHUTZ FÜR DIE UNTERE KÖRPERHÄLFTE DES PERSONALS AM OPERATIONSTISCH, AN DER KOPFEBENE DES PATIENTEN FÜR TISCH ALLURA AD7 - K 313/A3

Dieses Bleischild schützt die untere Körperhälfte des medizinischen Personals vor der Streustrahlung, ausgehend vom Tisch oder des Patientenkörpers.

Es lässt sich leicht am Ende des Tisches montieren und schützt das medizinische Personal, das sich in der Nähe des Tisches befindet. Er besteht aus einem 57 cm breiten Mittelteil und zwei 31 cm breiten, schwenkbaren Seitenarmen, an denen ein 80 cm langer, flexibler 0,5 mm Pb-Äquivalenzvorhang befestigt ist. Die Schwenkarme können entlang des Tisches oder um den Benutzer herum platziert werden.

Das obere 57 x 27 cm grosse, semi-flexible Teil mit einer Bleiäquivalenz von 0,5 mmPb bietet einen zusätzlichen Schutz für den Oberkörper. Das obere Teil kann schnell heruntergeklappt werden, um leichter zum Patienten zu gelangen oder es kann auch herausgenommen werden.

[Mehr Infos](#)





INDEX

B

Bleischutz für die untere Körperhälfte des Personals am Operationstisch, an der Kopfebene des Patienten für
Tisch Allura AD7 - K 313/A3 3

Bleischutz für die untere Körperhälfte des Personals am Operationstisch, an der Kopfebene des Patienten K
313/A2 1

V

Verbleiter Tischutz auf Fussebene K311/TC004 2