



ZUSAMMENFASSUNG

Doppelschürzen/Mäntel	2
Spray XRay Cleaner : Reiniger für Strahlenschutzbekleidung	2
Schilddrüsenschutzkragen "TS"	2
Röntgenschürzen für Kinder	3
Röntgenschürze mit 100%iger Frontüberlappung MADA	4
Doppel-Röntgenschürze mit 100% Frontüberlappung DA	6
Doppel-Röntgenschürze mit Clip-Frontverschluss WDA	7
Doppel-Röntgenschürze mit Klettbandverschluss an den Seiten CWDA	8
Röntgenschürze ohne Klettverschluss mit Rückenverschluss TABARD	10
Doppel-Röntgenschürze mit Frontverschluss WEDA	11
Elastischer Gürtel	12
Stickereien	12
Doppel-Röntgenschürze mit Überlappung in der Mitte BRDA	13



DOPPELSCHÜRZEN/MÄNTEL



SPRAY XRAY CLEANER : REINIGER FÜR STRAHLENSCHUTZBEKLEIDUNG

X-Ray Cleaner ist ein oberflächenaktiver biozider Reiniger und geprüft für die Anwendung bei Röntgenschutzkleidung. Der Reiniger enthält eine aktiv wirkende (quatäre) Ammoniumverbindung als Wirksubstanz sowie Komplexbildner zur Härtebindung.


Dadurch entsteht eine außergewöhnliche gute Reinigungswirkung bei gleichzeitiger guter Materialverträglichkeit.

X-Ray cleaner ist universell einsetzbar und eignet sich zur grundlegenden Reinigung von wasserfesten, technischen Textilien.

In 750 ml Flaschen verfügbar. Verpackung: 8 Flaschen

[Mehr Infos](#)



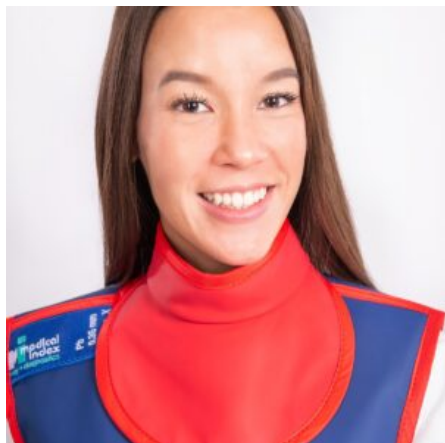

SCHILDDRÜSENSCHUTZKRAGEN "TS"

- Besonders für das medizinische Fachpersonal ist der Schilddrüsenschutz eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
- Mit unseren Schilddrüsenschutz können Sie sicher sein, dass die ganze Schilddrüse allumfassend geschützt ist.
- Mit Klett- oder **Magnetverschluss**.
- Er kann an die Röntgenschürze angenäht werden.
- Erhältlich in drei Größen : S, M, L.
- Bleiäquivalenz : 0.35 mmPb | 0.50 mmPb.
- In Option: Befestigung mit Clip zur Befestigung an Ihrem Mantel oder Ihrer Weste.
- Größen:
 - Gr. S = Halsumfang < 35 cm
 - Gr. M = Halsumfang 35 cm bis 44 cm
 - Gr. L = Halsumfang > 44 cm

NEU: Jetzt erhältlich mit Magnetverschluss statt Klettverschluss!

Grösse
Blei
Dicke

L, M, S

0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





RÖNTGENSCHÜRZEN FÜR KINDER

Die richtige Röntgenschürze auch für die Kleinen.

- Frontalschürze oder Doppelschürze.
- Klettverschlüsse auf den Hüften oder Clipgürtel für eine optimale Gewichtsverteilung.
- Einfach und schnell zum Anlegen und robust.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Eine integrierte Schilddrüsenschutzkragen ist ebenfalls für alle Modelle lieferbar und eine praktische Lösung.
- Bleiequivalenz : 0.25 mmPb | 0.35 mmPb | 0.50 mmPb.
- Erhältlich in VECTOR X bleifrei | VECTOR X bleiarm | Standard Blei

Breite 45 cm = Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren - Breite 50 cm = Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren - Breite 55 cm = Kinder im Alter von etwa 11 bis 13 Jahren.

Modell
Grösse

Frontalschürze, Mantel
50 Lang x 45 cm Breit, 60 Lang x 45 cm
Breit, 70 Lang x 45 cm Breit, 50 Lang x 50
cm Breit, 60 Lang x 50 cm Breit, 70 Lang x
50 cm Breit, 50 Lang x 55 cm Breit, 60
Lang x 55 cm Breit, 70 Lang x 55 cm Breit
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Qualität

Dicke

[Mehr Infos](#)





RÖNTGENSCHÜRZE MIT 100%IGER FRONTÜBERLAPPUNG MADA

Komplette Überlappung: Die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist, wird durch die vollständige Überlappung der 2 Frontpanelen bis zu den beiden Seitennähten erreicht (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design). Beispiel: Eine Schürze, die mit 0,50 mmPb beschriftet ist, hat auf jedem Paneel 0,25 mmPb und 0,50 mmPb auf dem Überlappungsteil, wenn die 2 Paneelen vollständig überlappt sind.



- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Ein Ausschnitt an der Rückseite damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Wird standardmässig mit einem externen Lendengurt mit Klettverschluss mit seitlichen Schlaufen und Druckknöpfen an der Innenseite der Schürze geliefert um eine gute Gewichtsverteilung zwischen Schultern und Hüfte zu gewährleisten.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.


Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

Dicke

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)

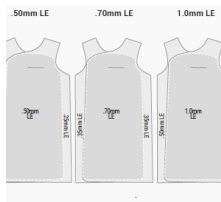

DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT 100% FRONTÜBERLAPPUNG DA

Komplette Überlappung: Die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist, wird durch die vollständige Überlappung der 2 Frontpanelen bis zu den beiden Seitennähten erreicht (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design). Beispiel: Eine Schürze, die mit 0,50 mmPb beschriftet ist, hat auf jedem Paneel 0,25 mmPb und 0,50 mmPb auf dem Überlappungsteil, wenn die 2 Paneelen vollständig überlappt sind.

- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Ein Ausschnitt an der Rückseite damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Wird standardmäßig mit einem elastischen Innengurt geliefert um eine gute Gewichtsverteilung zwischen Schultern und Hüfte zu gewährleisten (oder als Option : externer Lendengurt)
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für



Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei


XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)



DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT CLIP-FRONTVERSCHLUSS WDA

Schürze ohne Überlappung an der Vorderseite und auf dem Rücken gekreuzt. Das Frontpaneel hat die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design). Beispiel : Eine Schürze, die auf der Vorderseite mit 0,25 mmPb und auf der Hinterseite mit 0,25 mmPb gekennzeichnet ist, hat auf dem Frontpaneel 0,25 mmPb und auf der Hinterseite 2x0,125 mmPb überlappende Paneelen.

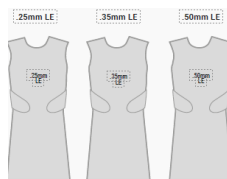

- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Diese Schürze wird von vorne angezogen und wird hinten überkreuzt. Geraffter Gürtel im Rücken für optimalen Komfort und Clipverschluss vorne.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Ein Ausschnitt an der Rückseite damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte



Beschichtung, die desinfizierbar ist!

- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 k

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Dicke


[Mehr Infos](#)





DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT KLETTBANDVERSCHLUSS AN DEN SEITEN CWDA

Seitenverschluss: Auf der Vorder- und Rückseite ist die Bleigleichwertigkeit auf dem Schürzenetikett angegeben. Beispiel: Eine Schürze mit der Bezeichnung 0,25 mmPb hat eine Vorder- und Rückseite aus 0,25 mmPb.

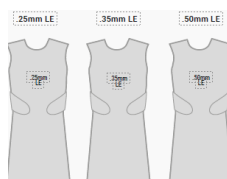

- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Verschluss an den Seiten und an der Schulter mit Klettverschluss.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 k

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei

Dicke

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





RÖNTGENSCHÜRZE OHNE KLETTVERSCHLUSS MIT RÜCKENVERSCHLUSS TABARD

Seitenverschluss: Auf der Vorder- und Rückseite ist die Bleigleichwertigkeit auf dem Schürzenetikett angegeben. Beispiel: Eine Schürze mit der Bezeichnung 0,25 mmPb hat eine Vorder- und Rückseite aus 0,25 mmPb.



- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Verschluss an den Seiten und an der Schulter mit Clipverschluss.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 k

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

Dicke

[Mehr Infos](#)





DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT FRONTVERSCHLUSS WEDA

Schürze ohne Überlappung an der Vorderseite und auf dem Rücken gekreuzt. Das Frontpaneel hat die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design). Beispiel : Eine Schürze, die auf der Vorderseite mit 0,25 mmPb und auf der Hinterseite mit 0,25 mmPb gekennzeichnet ist, hat auf dem Frontpaneel 0,25 mmPb und auf der Hinterseite 2x0,125 mmPb überlappende Paneelen.



- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Diese Schürze wird von vorne angezogen und wird hinten überkreuzt. Geraffter Gürtel im Rücken für optimalen Komfort. Verschluss an der Vorderseite und an der Schulter mit Klett- oder Magnetverschluss.
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Ein Ausschnitt an der Rückseite damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 k

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.



Dicke

Standard Blei
0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)



ELASTISCHER GÜRTEL



- Zur Unterstützung und Entlastung des Rückens ist unser elastischer Gürtel für medizinische Fachangestellte eine ideale Wahl.
- Lieferbar mit Klett- Clip- oder Magnetverschluss.

Grösse

S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75

[Mehr Infos](#)





STICKEREIEN



- Personalisieren Sie Ihre Röntgenschürze mit einer Stickerei entweder direkt auf der Schulter oder auf der Tasche (Tasche als Option) ; z.B. mit Namen, Abteilungen, Grössen, Logos... oder auf einem Klettband an der Schulter ansticken, so dass Sie bei Personalwechsel nur den Namen austauschen müssen.
- Es ist auch möglich die Stickerei auf dem Schilddrüsenschutzkragen anzubringen.

Tipp: Wir können die Namen auf Klettbänder sticken, die an der Schulter befestigt werden, so dass der Name nur bei einem Personalwechsel ausgetauscht werden kann.


[Mehr Infos](#)





DOPPEL-RÖNTGENSCHÜRZE MIT ÜBERLAPPUNG IN DER MITTE BRDA

Partielle Überlappung: Jedes Paneel hat die Bleiäquivalenz, die auf der Etikette markiert ist (gemäß IEC61331-3:2014- Art.5.2 Design).
Beispiel : eine Schürze, die mit 0,25 mmPb beschriftet ist, hat auf jedem Paneel 0,25 mmPb und 0,50 mmPb auf dem Überlappungsteil.

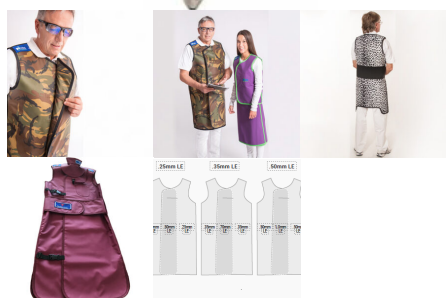

- Die Doppel- Röntgenschürze wurde dafür entwickelt, dass Ihnen ein optimaler Frontal- und Rückenschutz zugesichert werden kann. Ein kompletter Strahlenschutz von den Schultern bis über die Knie.
- Entwickelt für eine optimale Gewichtsverteilung und passt sich Ideal an alle Morphologien an.
- Sehr schnelles An- und Ausziehen. Widerstandsfähiger Klett- oder Magnetverschluss (neu).
- Mit bequemen Schulterpolstern ausgestattet.
- Ein Ausschnitt an der Rückseite damit Sie sich bequemer bewegen können.
- Wird standardmäßig mit einem elastischen Innengurt geliefert um eine gute Gewichtsverteilung zwischen Schultern und Hüfte zu gewährleisten (oder als Option : externer Lendengurt)
- Individuelle Seriennummer und QR-Code.
- Das Innenfutter ist so konzipiert, dass es sich leicht desinfizieren und trocknen lässt und unangenehme Schweißgerüche werden Sie nicht belasten.
- Mehr als 40 Farben, davon 12 „MATRIX“-Farben möglich, unsere revolutionäre viren- und bakteriendichte Beschichtung, die desinfizierbar ist!
- Unsere Strahlenschutzbekleidung ist CE-zertifiziert und erfüllt die Normen IEC 61331-1: 2014, DIN 6857-1 und ASTM F2547-06, von 50 kV bis 150 kV.

Optionen: Magnetverschluss, Namen direkt oder auf Klettschild aufgestickt, feste oder abnehmbare Ärmel, Innentasche für Dosimeter und einer externen Tasche, einem internen Gürtel oder einem externen Lendengurt, Schilddrüsenschutzkragen an der Schürze befestigt, RFID-Chip zur elektronischen Verfolgung, weitere Optionen auf Anfrage.

Grösse
Blei

XS 50, S 55, M 60, L 65, XL 70, XXL 75
VECTOR X Bleifrei, VECTOR X Bleiarm,
Standard Blei

Dicke

0.25 mmPb, 0.35 mmPb, 0.50 mmPb

[Mehr Infos](#)





INDEX

D

Doppel-Röntgenschürze mit 100% Frontüberlappung DA 5

Doppel-Röntgenschürze mit Clip-Frontverschluss WDA 6

Doppel-Röntgenschürze mit Frontverschluss WEDA 10

Doppel-Röntgenschürze mit Klettbandverschluss an den Seiten CWDA 8

Doppel-Röntgenschürze mit Überlappung in der Mitte BRDA 13

E

Elastischer Gürtel 11

R

Röntgenschürze mit 100%iger Frontüberlappung MADA 4

Röntgenschürze ohne Klettverschluss mit Rückenverschluss TABARD 9

Röntgenschürzen für Kinder 3

S

Schilddrüsenschutzkragen "TS" 2

Spray XRay Cleaner : Reiniger für Strahlenschutzbekleidung 1

Stickereien 12